


43. MACH OP-LEUCHTEN

Mach 120 / 120F

Einstellen der Bremsselemente


Lieferumfang

- Mutter M12x1 t=5, Nr. 67900002
- Tellerfeder DIN 2093 25x12,2x1, Nr. 65982006
- Verdrehschutz, Nr. 08000203
- Bremsscheibe Kunststoff, Nr. 10030208
- Scheibe Stahl, Nr. 10030210

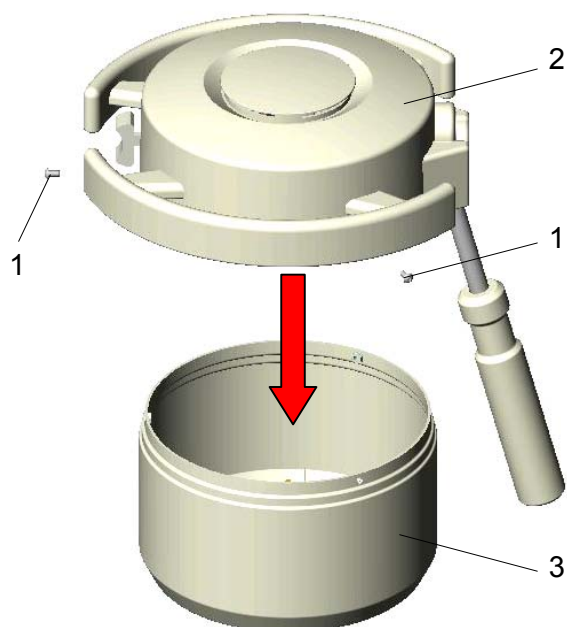


1. Gehäuse-Unterteil abnehmen

- Leuchte spannungslos schalten!
- Drei Schrauben 1 am Umfang des Leuchenträgers 2 lösen.
- Das Gehäuse-Unterteil 3 nach unten abnehmen.

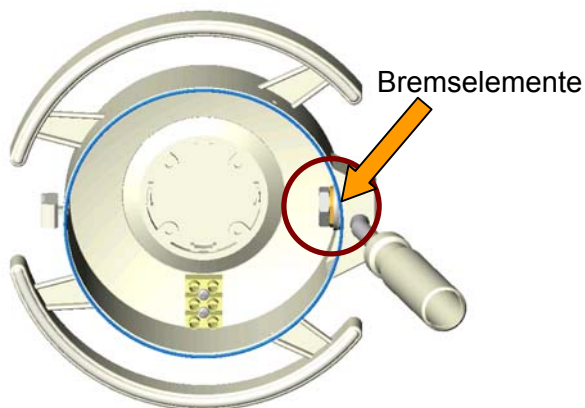

2. Bremsselemente austauschen


Lage der Bremsselemente

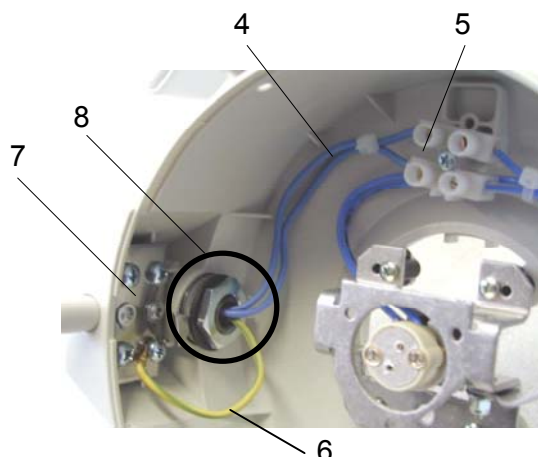

- Die beiden blauen Kabel **4** durch Lösen der Schrauben von der Klemmleiste **5** abklemmen.
- Das gelb-grüne Erdungskabel **6** durch Lösen der Schraube von der Platte **7** abklemmen.
- Die Bremselemente **8** abnehmen und entsorgen.

3. Einbau der neuen Bremselemente

- Die neuen Bremselemente in der unten gezeigten Reihenfolge montieren.

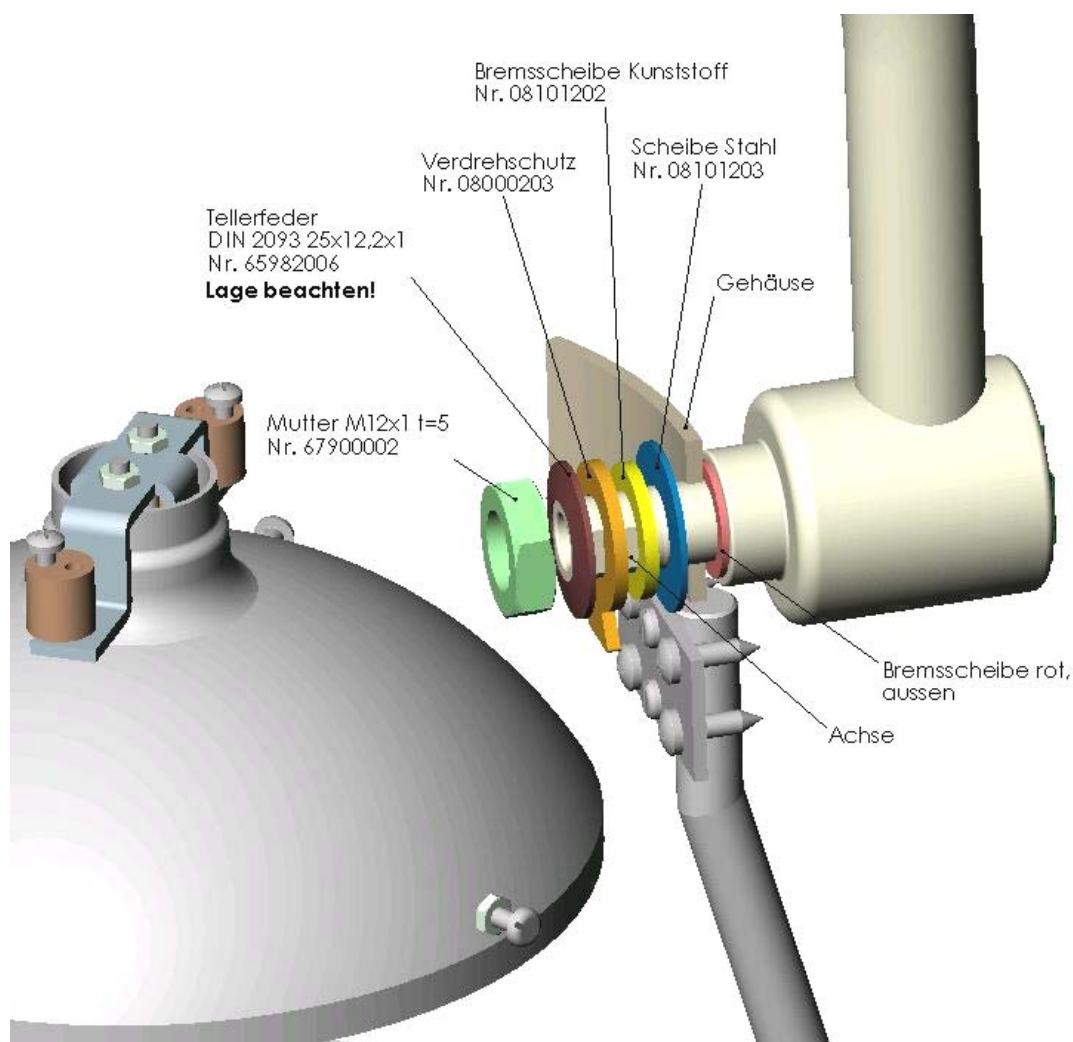

- Die beiden Kabel **4** wieder an der Klemmleiste **5** anklemmen.
- Das gelb-grüne Kabel **6** wieder an der Platte **7** befestigen.

4. Montage des Gehäuse-Unterteils

- Das Gehäuse-Unterteil in umgekehrter Reihenfolge als bei **Punkt 1** beschrieben montieren.